



Explorar la tecnología
genética para mejorar la
calidad de vida



Pluslife CRQ Card

One Nucleic Acid Test Card
Four Canine Pathogen Identification

CDV

CPIV

CAV-2

Bb



Pluslife CRQ Card

Una tarjeta de prueba de ácido nucleico
Identificación de cuatro patógenos caninos




Pluslife Mini Dock es un sistema de diagnóstico molecular rápido que puede utilizarse para detectar el virus del moquillo canino (CDV), el virus de la parainfluenza canina (CPIV), el adenovirus canino tipo 2 (CAV-2) y Brodetella bronchiseptica (Bb) en una sola prueba. Nuestra tecnología de amplificación isotérmica de desarrollo propio, RHAM, proporciona excelentes resultados comparables a las pruebas qPCR. El equipo es compacto y portátil, con un procedimiento sencillo que permite obtener resultados en 35 minutos.

Características

- RÁPIDO**
Tiempo de prueba en **35** minutos
- SENCILLO**
Tiempo de manipulación inferior a **2** minutos
- PRECISO**
Límite de detección de **1000** copias/mL
- POTENTE**
Detecta **4** patógenos en una sola prueba

Clínicamente probado

Resultados de la comparativa

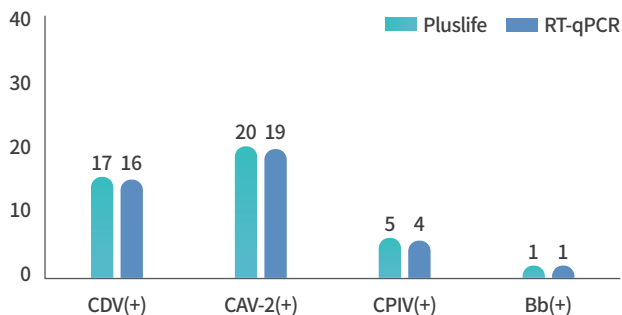

PPA


CDV: **100%**

CAV-2: **94.7%**


CPIV: **100%**

Bb: **100%**

Procedimiento de prueba

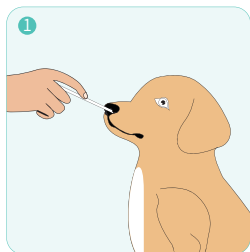

1 Recoger muestra

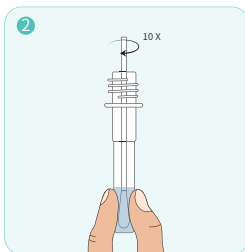

2 Mezclar muestra



3 Ejecutar prueba

Resultados



✓ Mini Dock



✓ Software PC



✓ App móvil

Uso en



Hospital/clínica de mascotas





Tienda para mascotas



Centro de Control de Enfermedades Animales

Especificaciones

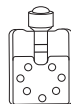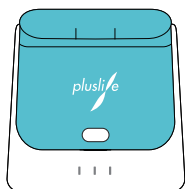

Pluslife Mini Dock	
Dimensiones	101 x 91 x 65 mm
Peso	210 g
Conexión	Programa informático o aplicación móvil
Temperatura de funcionamiento	15°C–30°C
Humedad de funcionamiento	≤80%

Pluslife CRQ Card	
Patógeno diana	CDV, CPIV, CAV-2, Bb
Tipo de muestra	Hisopo ocular/nasal/orofaríngeo
Límite de detección (LdD)	1000 copias/mL
Tiempo de prueba	35 minutos
Vida útil	13 meses a temperatura ambiente

Distribuido por

BIO SYNEX
Iberica

Guangzhou Pluslife Biotech Co.,Ltd.

 Floor 3, Block E, Runhui Science & Technology Park, No.18 Shenzhou RD, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China

 +86-20-31703986  market@pluslife.com  www.pluslife.com



Website



LinkedIn



Line