



Uso en



Hospitales



Clínicas





Otros

Pluslife Strep A Card

Estreptococos del grupo A

Especificaciones

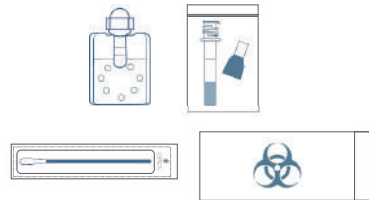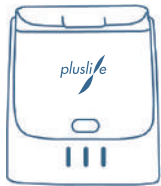

Pluslife Mini Dock

Dimensiones	101 x 91 x 65 mm
Peso	210 g
Conexión	Programa informático o aplicación móvil
Temperatura de funcionamiento	15°C–30°C
Humedad de funcionamiento	≤ 80%

Pluslife Strep A Card

Patógeno diana	Strep A
Límite de detección (LdD)	1000 copias/mL
Tiempo de prueba	30 minutos
Vida útil	13 meses a temperatura ambiente
Tipo de muestra	Hisopo oro-faríngeo

Distribuido por

BIO SYNEX
Ibérica

Guangzhou Pluslife Biotech Co.,Ltd.

Floor 3, Block E, Runhui Science & Technology Park, No.18 Shenzhou RD, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China
+86-020-31703986 market@pluslife.com www.pluslife.com



PLGAS-INT-20230322



Una prueba molecular POC rápida, precisa e in situ para enfermedades respiratorias

Pluslife Strep A Card

Pluslife Mini Dock es un sistema de diagnóstico molecular rápido que puede utilizarse para detectar estreptococos del grupo A (GAS). Nuestra tecnología de amplificación isotérmica de desarrollo propio, RHAM, proporciona excelentes resultados comparables a las pruebas qPCR. El equipo es compacto y portátil, con un procedimiento sencillo que permite obtener resultados en 30 minutos.

Características



RÁPIDO

Resultados en 30 minutos



FÁCIL

Tiempo de manipulación inferior a 2 minutos



PRECISO

Límite de detección de 1000 copias/mL




ACCESIBLE

De la muestra al resultado en 4 pasos




Procedimiento de prueba

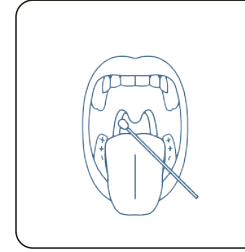


1. Recogida de muestra

Recoger la muestra con hisopos orofaríngeos

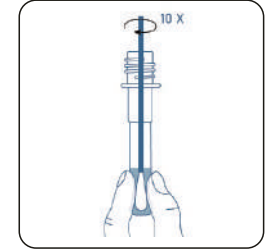


2. Mezclar la muestra

Introducir el hisopo en el tubo de muestra, mezclar, apretar 10 veces y desechar

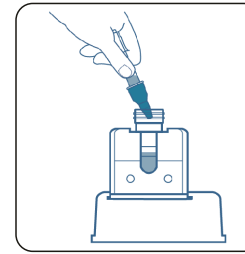

3. Preparar la tarjeta

Transferir la muestra a las cámaras de la tarjeta de reacción

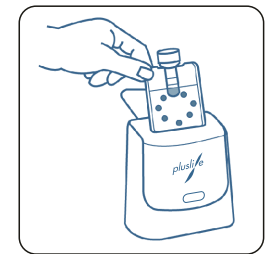

4. Ejecutar la prueba

Encienda el dispositivo e introduzca la tarjeta de reacción para iniciar la prueba

Resultados



✓ Mini Dock



✓ Programa para PC



✓ Aplicación móvil